

■新生児蘇生法（NCPR）普及事業のガイドラインに基づいた効果的な蘇生法が可能です



①カラー付きマンメーター

圧モニタリングできることにより、安全で効率的に蘇生ができます。



②呼吸排出バルブ

流量調節ができ、CPAP/PEEPが可能です。




③ノンラテックスの呼吸バッグ

材質：ネオプレン／肺のコンプライアンスを感じやすい柔らかさです。

●6φチューブ差し（S）

オプションの6φチューブ差しを使用することでTピースとブレンダーの接続が容易に行えます。

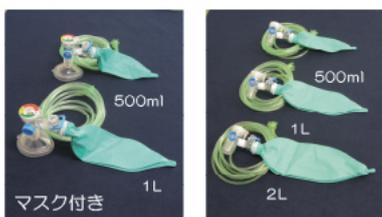

【3種類のサイズ展開】 500ml・1L・2L

④圧抜きバルブ（ロッククリップ付き）

クリップを外す（写真）ことにより、40cmH₂O以上かからない安全機構になっています。



商品コード	商品名	型番	規格容量
1256683	T-ピース 500ml呼吸バッグ	10-55832	10本入
1256671	T-ピース 500ml呼吸バッグ マスク付き	10-55833	10本入
1244073	T-ピース 1L呼吸バッグ	10-55834	10本入
1244085	T-ピース 1L呼吸バッグ マスク付き	10-55835	10本入
1244103	T-ピース 2L呼吸バッグ	10-55844	10本入

販売元： **イワキ株式会社**

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号

TEL 03-3913-2341

FAX 03-3913-6003