



酸素供給用経鼻カニューレ

# IWAKI ハイフローネーザルカニューラ

ブレンダー、ハイフローオプションを  
備えた CPAP デバイスや人工呼吸器と  
使用できます。

高流量鼻カニューラ療法 (HFNC) 用の  
成人用ネーザルカニューラです。

プロングサイズは4種類



## 各部説明

**7** 日間を目安に  
交換して  
使用してください

● シリコン製のプラグで  
4サイズ展開しています。



● 本体コネクターは左右どちらにも  
プラグを付けることができます。

● ストラップ



● ヘッドギア


● クリップ

● 軽量でフレキシブルな  
チューブです。


● アダプター (22OD/15ID) は  
滑らかに回転し自由な  
ポジショニングが可能です。

## 装着ガイド

鼻孔の隙間の50%程度となるプラグが  
推奨のサイズです。適切なサイズのIWAKI  
ハイフローネーザルカニューラを選択して  
ください。

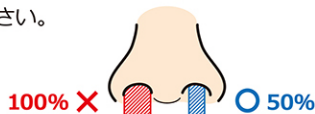


本体コネクターは左右どちらにもプラグ  
を付けることができます。  
併用するブレンダーやハイフローオプショ  
ンを備えた CPAP 装置等の設置位置や回路  
のポジショニングにあわせて、プラグの  
取り付けを調整してください。

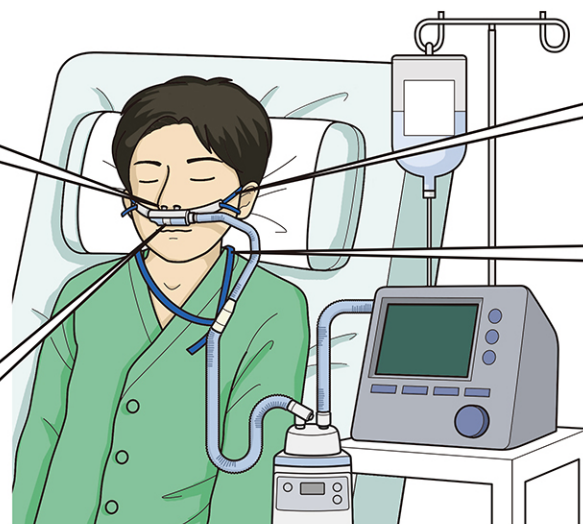

ヘッドギアを調整してください。  
締めすぎないように注意してく  
ださい。

ストラップを使用することで、鼻  
元周りの重みを軽減できます。ま  
た回路のテンションがハイフロー  
ネーザルカニューラにかかりにく  
い固定ができます。

(\*1) mm表示の寸法は参考値となります。

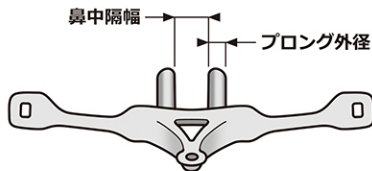

サイズ	鼻中隔幅 (*1)	プラグ外径 (*1)	最大流量
X S	9mm	4mm	30L/min
S	10mm	5mm	40L/min
M	11mm	6mm	60L/min
L	11mm	7mm	60L/min

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1648731	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ X S	14952	10個入	4987019701325
1648755	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ S	14953	10個入	4987019701332
1648779	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ M	14954	10個入	4987019701349
1648792	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ L	14955	10個入	4987019701356

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.