

QLブリーザーセット


自発呼吸が必要な呼吸モードのテスト・呼吸管理トレーニングに



5種類の自発呼吸パターンをシミュレーション

それぞれの呼吸型において、呼吸回数、換気量、I:E比（アプノースの場合は呼吸停止の割合）を簡単に設定できます。

- ユーブニア呼吸
- チェーンストーク呼吸
- ピオー呼吸
- クスマウル呼吸
- アプノース呼吸

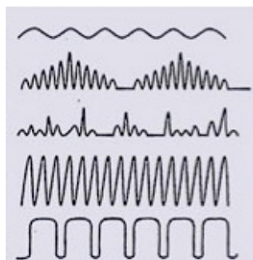


3種類のコンプライアンス設定

クイックラングのスプリングにより、成人用は 10, 20, 50mL/cmH₂O、小児用は 3, 7, 15mL/cmH₂O の設定が可能です。



3種類のレジスタンス設定

クイックラングで▲の印が並ぶようにセットするだけで 5, 20, 50cmH₂O/L/S の設定が可能です。

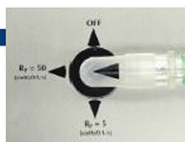

<クイックラング>

コンプライアンス	成人用 10、20、50ml/cmH ₂ O 小児用 3、7、15ml/cmH ₂ O
レジスタンス	5、20、50cmH ₂ O/L/S
一回換気量	成人用 1200ml 小児用 400ml
寸法	185 x 277 x 58mm
重量	1.6kg

<QLブリーザー>

寸法	185 x 277 x 58mm
重量	1.6kg
所要電源	24VDC 1.3/2.3A (パワーサプライ100~240VAC 1.5/3.0A)

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1595209	QLブリーザーセット 小児用	1520210	1セット	4987019701165
1595192	QLブリーザーセット 成人用	1520200	1セット	4987019701172

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

【製造業者】 IngMar Medical, LLC

